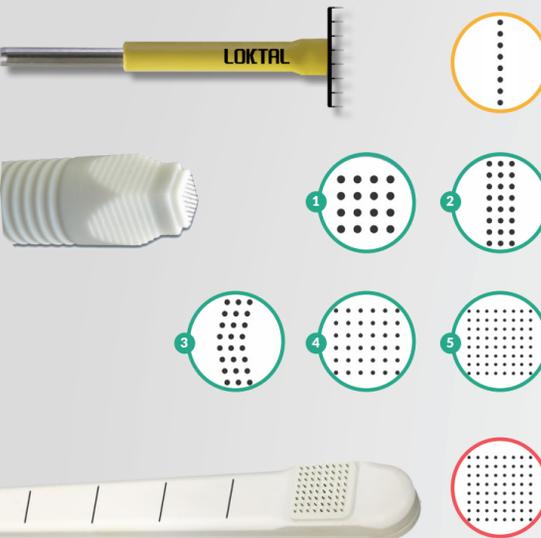


PIÈCES À MAIN

FORMATION ET SAV



ÉLECTRODE D'OCULOPLASTIE MULTIAIGUILLES EN TUNGSTÈNE POUR RF PULSÉE LIMA (USAGE UNIQUE)

ACEL1552 | Ø 0,1 mm | 8 aiguilles | Longueur des 8 aiguilles : 2 mm

PIÈCES À MAIN "FRAXX" POUR UTILISATION EN RADIO FRÉQUENCE FRACTIONNÉE MICRO-ABLATIVE (RFFMA)

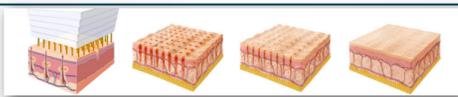
- 1 ACEL0257 | Ø 0,2 mm | 16 aiguilles (4x4)
- 2 ACEL0258 | Ø 0,2 mm | 24 aiguilles (8x3)
- 3 ACEL0259 | Ø 0,2 mm | 24 aiguilles courbe (8x3)
- 4 ACEL0256 | Ø 0,2 mm | 32 aiguilles (8x4)
- 5 ACEL0255 | Ø 0,2 mm | 64 aiguilles (8x8)

PIÈCE À MAIN "LINLY" POUR UTILISATION RFFMA

Ø 0,2mm | 64 aiguilles (8x8)

Fraxx FONCTION RANDOM EXCLUSIVE : distribution par impacts aléatoires :

Le système dispose d'un mode exclusif «smartshot» de contrôle des tirs fractionnés aléatoires. L'énergie subablative est distribuée avec précision ce qui permet de ne pas exciter simultanément tous les micropoints : mais ceux situés dans une séquence aléatoire prédéfinie (smartshot), en évitant la sommation de l'effet thermique latéral et en minimisant les dommages causés au derme et à l'épiderme. Les tissus adjacents aux micropoints vaporisés sont épargnés, parfaitement sains et aptes à produire une nouvelle collagénese. Résultats : régénération du derme et de l'épiderme.



AIGUILLES QUALITÉ TUNGSTÈNE

L'ensemble des pièces à main et électrodes sont fabriquées au Brésil au sein de la manufacture Loktal. Les aiguilles 100% tungstène (pour une meilleure conduction électrique sans échauffement) sont recouvertes à la main d'une couche de céramique protectrice.

SOLUTION INTÉGRÉE, ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE



Formation et accompagnement des médecins

Une formation complète est assurée par nos instructeurs et médecins partenaires pour tout achat de matériel Loktal. Cette formation est délivrée aux équipes sur site. Nos supports techniques sont disponibles à tout moment.



Environnement dédié

Nous vous fournissons la documentation patients (docs salle d'attente) et des films de présentation des techniques utilisées.



SAV et révisions "all included"

Loktal, fabricant de matériel médical depuis 1990 est leader du marché brésilien. Nos techniciens agréés basés en France assurent le SAV et la maintenance des appareils pour une parfaite tranquillité des praticiens. Contrat de maintenance possible de 1 à 5 ans.



[MATÉRIEL GARANTI 2 ANS]



Des workshops d'initiation sont régulièrement organisés dans notre siège parisien. Pour connaître les dates et programmes de nos ateliers, rendez-vous sur www.loktal.fr.



BIOMED Fraxx
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

Découvrez l'unité de radiofréquence la plus polyvalente en esthétique médicale



40 000 unités vendues
Des milliers de patients traités



Haute fréquence
Basse température



En médecine et chirurgie esthétique



EN RÉSUMÉ



TECHNOLOGIE BRÉSILIENNE

40 000 unités de radiofréquence vendues depuis 1999. Les unités et accessoires sont fabriqués exclusivement dans les usines Loktal au Brésil (liste des accessoires sur demande)



5 MODES POUR UNE UTILISATION À 360°

Mode MONOPOLAIRE, Mode BIPOLAIRE, Mode PLASMA FULGURATION, Mode PULSE, Mode RFFMA.



ÉCRAN TACTILE

Écran de contrôle 4,3 pouces entièrement tactile pour une utilisation simple et conviviale.



L'UNITÉ LA PLUS POLYVALENTE DU MOMENT

Là où d'autres proposent des matériels adaptés à chaque spécialité, Loktal a développé une solution unique permettant d'accomplir un très grand nombre d'actes médicaux et chirurgicaux avec précision et sécurité. Notre matériel intègre des technologies les plus abouties pour garantir confort des actes et efficacité des résultats.



ENTIÈREMENT MODULABLE

Les unités fonctionnent comme des blocs associés selon les besoins des praticiens. L'ensemble des modules (Wavetronic, Megapulse Fraxx et Wavac Dual) couvrent 77 indications pour un traitement au cabinet.

CONTACT



✉ loktal75008@gmail.com

📱 Whatsapp // +336 38 68 84 32

📍 230, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris VIII^e France

🌐 www.loktal.fr

Distributeur exclusif Loktal France et EU



Distributeur exclusif HSC France et EU



Distributeur exclusif FaceLabs France et EU



RFFMA Radiofréquence Fractionnée Micro Ablative



BIOMED BOX

INDICATIONS

MISE EN ŒUVRE (quelques exemples)

LOKTAL Lima

Blépharoplastie non chirurgicale
Poches malaires et palpébrales
Rétraction cutanée
Rides périorbitales
Cernes



T.Q. Tungsten Quality

CONTENU

- ✓ 1 pièce à main
- ✓ 10 électrodes LIMA 8 microaiguilles
- ✓ Docs salle d'attente
- ✓ Film de présentation

LOKTAL Fraxx

Rajeunissement (qualité de la peau)
Rides péribuccales (code-barres)
Cicatrices de varicelle
Cicatrices d'acné
Taches pigmentaires
Relâchement cutané
Vergétures



T.Q. Tungsten Quality

CONTENU Fraxx Code-barres

- ✓ 1 pièce à main Fraxx 32 aiguilles
- ✓ Docs salle d'attente
- ✓ Film de présentation

CONTENU Fraxx Cicatrices

- ✓ 1 pièce à main 32 ou 64 aiguilles
- ✓ Docs salle d'attente
- ✓ Film de présentation

LOKTAL Linly

Rajeunissement vaginal
Rajeunissement de la vulve
Défaut d'hydratation vulvo-vaginale
Dyspareunie

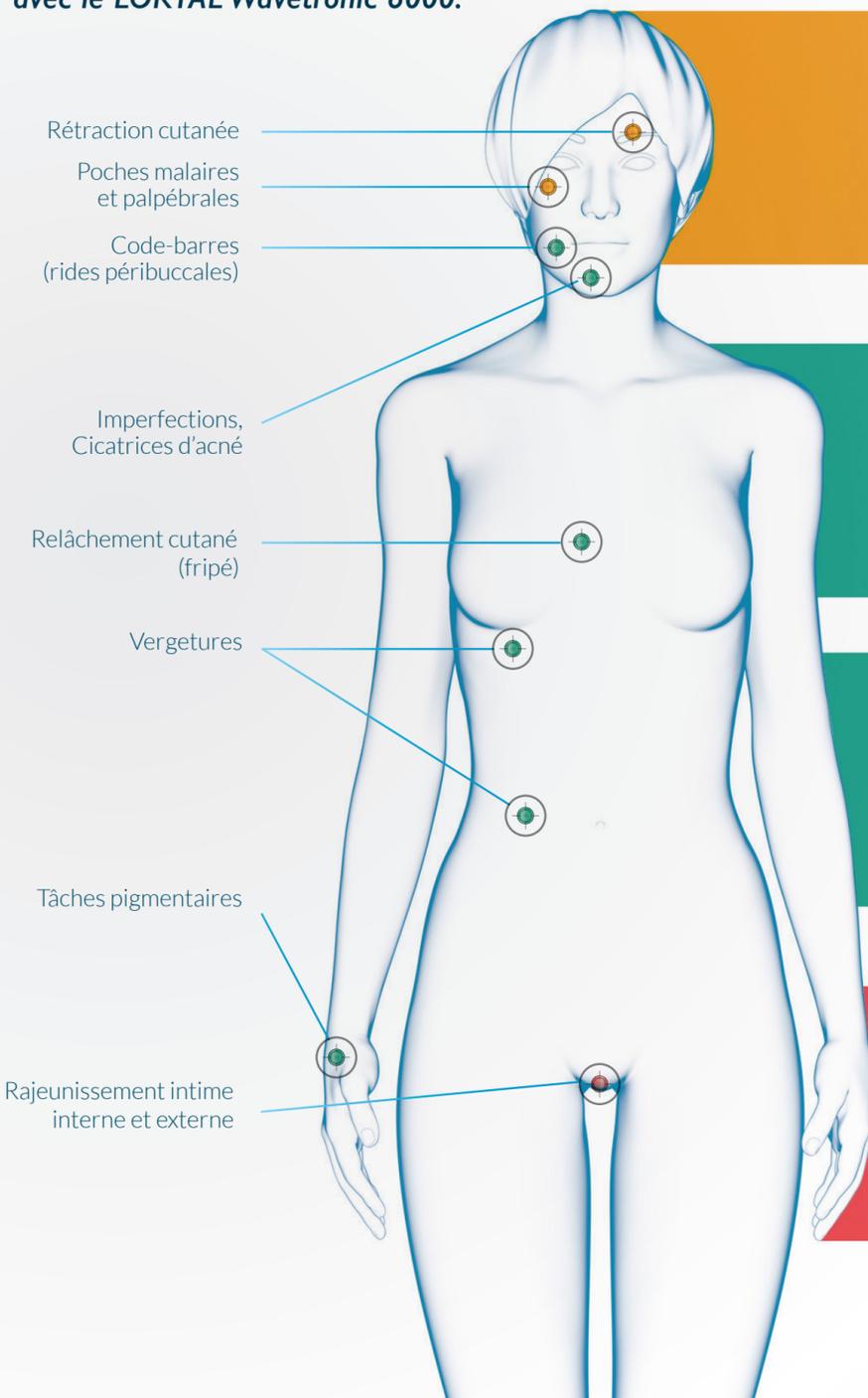


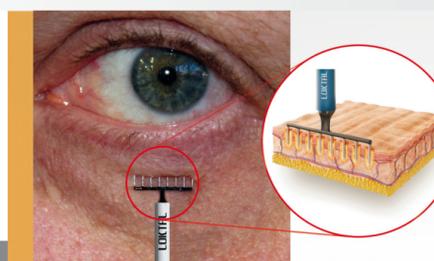
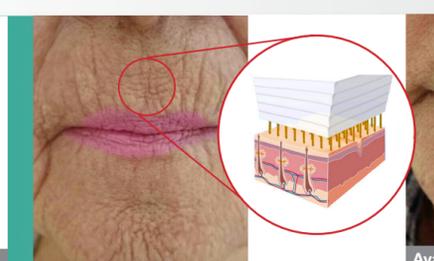
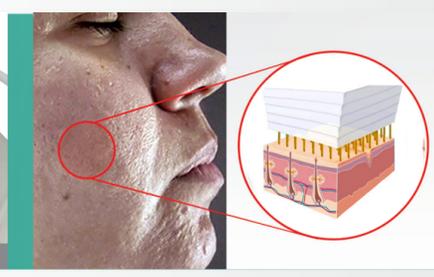
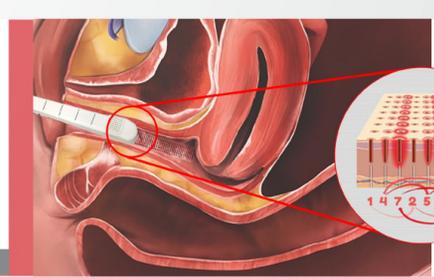
T.Q. Tungsten Quality

CONTENU

- ✓ 1 pièce à main Linly
- ✓ Docs salle d'attente
- ✓ Film de présentation

Toutes ces indications peuvent être traitées au cabinet avec le LOKTAL Wavetronic 6000.



| Mode | Électrodes | Application | Résultats |
|---|--|---|--|
| <p>Regard</p>  <p>RF pulsée</p> |  <p>Électrode Multi-aiguilles 8</p> |  |  <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p> |
| <p>Code-barres</p>  <p>RF fractionnée</p> |  <p>Pièce à main Fraxx 64</p> |  |  <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p> |
| <p>Cicatrices</p>  <p>RF fractionnée</p> |  <p>Pièce à main Fraxx 32</p> |  |  <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p> |
| <p>Intimité</p>  <p>RF fractionnée</p> |  <p>Pièce à main Linly</p> |  |  <p>Avant l'intervention Après 2 séances</p> |