

KIT DE 7 ÉLECTRODES
(contient 2 exemplaires de chaque référence)

Chirurgie



1- ACEL0139 | Ø 0,3 mm | Coagulation et vaporisation



2- ACEL0140 | Ø 0,5 mm | Biopsie et Excision



3- ACEL0141 | Ø 0,3 mm | Incision, profondeur ajustable



4- ACEL0142 | Ø 0,7 mm | Biopsie et Excision



5- ACEL0143 | Ø 12 mm | Biopsie et Excision



6- ACEL0144 | 9 mm x 9 mm x 9 mm | Biopsie et Shaving



7- ACEL0145 | 10 mm x 10 mm | Biopsie et Excision

ÉLECTRODE D'OCULOPLASTIE MULTIAIGUILLES POUR RF PULSÉE LIMA (USAGE UNIQUE)



ACEL1552 | Ø 0,1 mm | 8 aiguilles | Longueur aiguilles : 2 mm

ÉLECTRODES (QUELQUES RÉFÉRENCES)



ACEL0132 | 45° | Coagulation et vaporisation



ACEL0136 | 45° | Coagulation et vaporisation



ACEL0137 | 45° | Coagulation et vaporisation



ACEL0139 | Ø 0,5 mm | Coagulation et vaporisation



ACEL0232 ou 0229 | longueur 90 ou 100 mm | Incisions microprécises



ACEL0019 | Ø 0,3 mm | Coagulation et vaporisation



ACEL0238 | Ø 0,3 mm | Coagulation et vaporisation



ACEL0221 | 50 ou 75 mm | Incisions microprécises

Pulse



ACEL1552 | Ø 0,1 mm | 8 aiguilles | Longueur aiguilles : 1 mm



ACEL1507 | Ø 0,9 x 115 mm | Nettoyage du conduit lacrymal




ACEL1507 | Pince bipolaire baïonnette | 17 cm/1mm



Fraxx
Electrode Linly (intimité)



ACEL0907 | Électrode Fraxx | 64 aiguilles Ø 0,2 mm

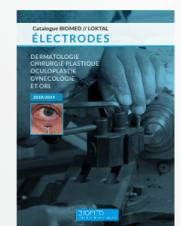

CATALOGUE SUR DEMANDE (79 références)

GARANTIES & SUPPORTS

Exclusivité territoriale France - Suisse - Belgique - Maroc - Tunisie - Algérie - E.A.U - Qatar

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION



Formation des médecins et assistants
Une formation complète est assurée par nos instructeurs et médecins partenaires pour tout achat de matériel Loktal. Cette formation est délivrée aux équipes sur site. Nos supports techniques sont disponibles à tout moment.

Environnement dédié
Nous vous fournissons la documentation patients (docs salle d'attente) et des films de présentation des techniques utilisées.

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET SUPPORT SAV



Supports techniques
Une formation complète est assurée par nos instructeurs et médecins partenaires pour tout achat de matériel Loktal. Cette formation est délivrée aux équipes sur site. Nos supports techniques sont disponibles à tout moment.

CERTIFICATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

STANDARD UNIVERSEL DES ACCESSOIRES DE BLOC TOUTES MARQUES

CE 0086
ISO 13485
ISO 9001

[MATÉRIEL GARANTI 2 ANS]



SAV et révisions « all included »
Loktal, fabricant de matériel médical depuis 1990 est leader du marché brésilien. Nos techniciens agréés basés en France assurent le SAV et la maintenance des appareils pour une parfaite tranquillité des praticiens. Contrat de maintenance possible de 1 à 5 ans.

LOKTAL WAVETRONIC 6000 *Touch* + FRAXX

UNITÉ CHIRURGICALE HAUTE RADIO FRÉQUENCE

- Dermatologie
- Chirurgie plastique & reconstructrice
- Ophthalmologie & ORL
- Gynécologie



RF
PUISSANCE
4 MHz
LOKTAL

MATÉRIEL

MODES 6 FORMES D'ONDE POUR UNE UTILISATION À 360°

SPECIALITÉS INDICATIONS

PUISSANCE
4 MHz

LOKTAL



UNITÉ CENTRALE WAVETRONIC 6000 Touch + FRAXX



TECHNOLOGIE BRÉSILIENNE

40 000 unités de radiofréquence vendues depuis 1999. Les unités et accessoires sont fabriqués exclusivement dans les usines Loktal au Brésil.



ENTIÈREMENT MODULABLE

Les unités fonctionnent comme des blocs associés selon les besoins des praticiens. L'ensemble des modules (Wavetric, Megapulse Fraxx et Wavac Dual) couvre 77 indications pour un traitement au cabinet ou au bloc.



ÉCRAN TACTILE

Écran de contrôle 4,3 pouces entièrement tactile pour une utilisation simple et conviviale.




L'UNITÉ LA PLUS POLYVALENTE DU MOMENT

Là où d'autres proposent des matériels adaptés à chaque spécialité, Loktal a développé une solution unique permettant d'accomplir un très grand nombre d'actes médicaux en intégrant des technologies les plus abouties pour garantir confort des actes et efficacité des résultats.

Caractéristiques TECHNIQUES

SORTIE	MODE	PUISSANCE (MAX en Watts RMS)	
Mode Monopolaire	CUT	90	300
	BLEND 1	80	
	BLEND 2	70	
	BLEND 3	50	
	FULG	30	
Mode Bipolaire	COAG	100	50
	BIPOLAIRE	50	


PLUG SYSTEM

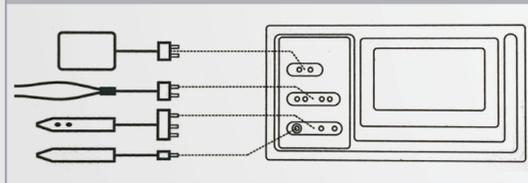

Wavac Dual pour aspiration des fumées et odeurs inconfortables.

ACCESSOIRES WAVETRONIC 6000 Touch


- ✓ Chariot
- ✓ Filtre à charbon activé
- ✓ Pince bipolaire
- ✓ Câbles
- ✓ Pédale
- ✓ Porte-électrode
- ✓ Flexibles
- ✓ Megapulse
- ✓ Plaque neutre
- ✓ Atténuateur de puissance
- ✓ Speculum
- ✓ Stericaps

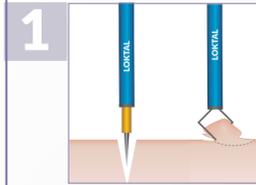

Mode MONOPOLAIRE

FONCTION CUT


- ✓ Coupe microdouce
- ✓ Chaleur latérale minime
- ✓ Destruction cellulaire minime
- ✓ Idéal pour incision, excision et biopsie

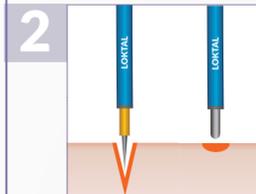

Mode BLEND et COAG


4 MODES

- ✓ Coupe avec hémostase
- ✓ Chaleur latérale minime
- ✓ Destruction cellulaire minime
- ✓ Idéal pour incision et biopsie

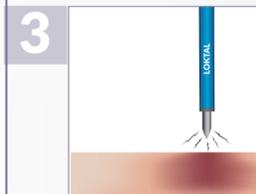

Mode ÉTINCELLAGE (plasma)


- ✓ Pénétration maximale
- ✓ Idéal pour destruction tissulaire localisée
- ✓ Hémostase maximale

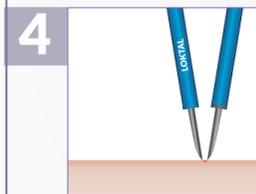

Mode BIPOLAIRE

AVEC PINCE ARGENT


- ✓ Pin point
- ✓ Micro coagulation
- ✓ Nécrose des tissus minime
- ✓ Idéal pour coagulation

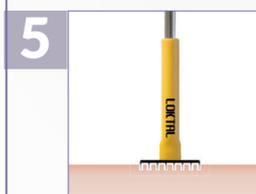

Mode PULSE

MODE HÉMO

- ✓ Radio fréquence pulsée
- ✓ Chaleur latérale minime
- ✓ Destruction cellulaire minime
- ✓ Idéal pour incision et biopsie

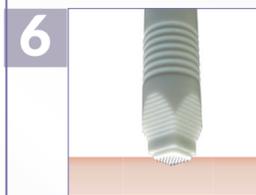

Mode FRAXX

5 MODÈLES DIFFÉRENTS DE PIÈCES À MAIN

- ✓ Radiofréquence fractionnée
- ✓ Chaleur latérale minime
- ✓ Destruction cellulaire minime
- ✓ Idéal pour incision et biopsie

Bénéfices patients et confort du praticien

Précision de l'acte : Les incisions et la coupe sont extrêmement précises sur une large variété de tissus.

Polyvalence : Le Loktal Wavetric 600 touch couvre 77 indications.


Récupération rapide : La haute fréquence associée à la basse température limite la destruction des tissus. La cicatrisation est nettement accélérée.

Post op facilité : Les suites de l'acte chirurgical par radiofréquence laissent moins de séquelles (œdèmes post chirurgicaux minimes).

Respect des tissus : La chirurgie par radiofréquence minimise la brûlure tissulaire contrairement aux lasers classiques et à l'électrochirurgie.

Réduction de la fumée : Permet une meilleure visualisation de l'acte et réduit les odeurs désagréables.



Coupes histologiques

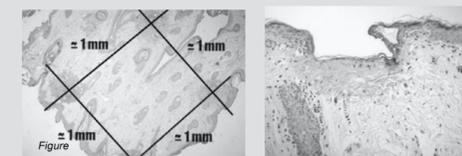

La coupe histologique horizontale montre des points équidistants

La coupe histologique met en évidence une distorsion cellulaire minime lors de l'excision tissulaire.

Tableau comparatif des dommages tissulaires (technologies principales)

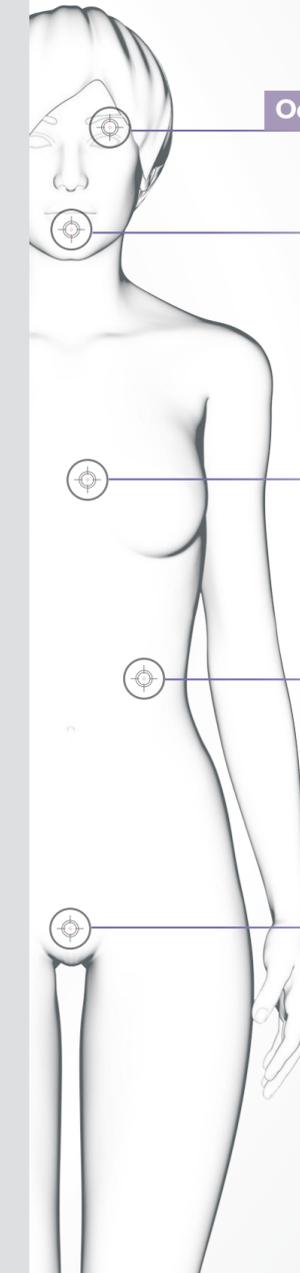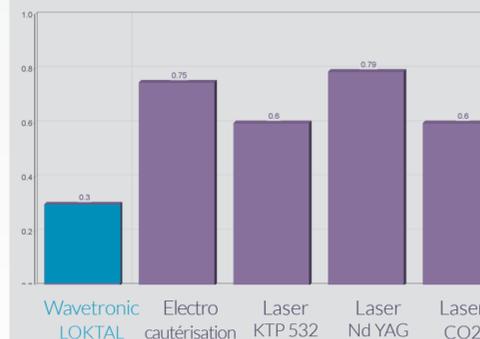

Oculoplastic/Ophthalmologie

ORL & Plasticie faciale

Chirurgie plastique

Dermatologie

Gynécologie

- ✓ Rétraction cutanée
- ✓ Blépharoplastie (sup. et inf.) non chirurgicale et chirurgicale
- ✓ Syringome des paupières
- ✓ Déficit d'hydratation du canal lacrymal
- ✓ Trichiasis
- ✓ Anthropion
- ✓ Xanthelasma
- ✓ Ptosis
- ✓ Rhynophima

- ✓ Chirurgie des mélanomes
- ✓ Excision des lésions (carcinome, naevi, excroissance)
- ✓ Biopsie pour analyse
- ✓ Chirurgie du cuir chevelu

- ✓ Naevi
- ✓ verrues
- ✓ Point rubis
- ✓ Cheloïte acnéique
- ✓ Retouche de cicatrice
- ✓ Excision de verrue
- ✓ Épilaton (par RF)
- ✓ Matrixectomie
- ✓ Lifting otoplastie
- ✓ Lifting facial
- ✓ Lambeau
- ✓ Télangectasie (par RF : thermorégulation)

- ✓ Dyspareunie
- ✓ Déficit d'hydratation vaginale
- ✓ Laxité vaginale
- ✓ Procédure LEEP
- ✓ Conisation
- ✓ Nymphoplastie
- ✓ Condilome

Toutes ces indications peuvent être traitées au cabinet avec le LOKTAL Wavetric 6000 touch + Fraxx