

ADVANTAGES OF FOLLIPEN

ATOUTS DU FOLLIPEN

Follipen HAIR TRANSPLANTER

► EASY TO REPLACE AND ADJUST NEEDLE'S LENGHT

► REUSABLE AND AUTOCLAVE

Initially insert the needle with placed grafts, which act as dilator. Then push the plunger at time as grafts are easily placed into the scalp. There is no need to have incision made followed by a blunt dilator.

** This technique is issued in Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, vol 18, number 11, nov 1992.*

► AIGUILLE FACILE À REMPLACER ET AJUSTER

► RÉUTILISABLE ET COMPATIBLE AUTOCLAVE

Insérez d'abord l'aiguille avec des greffons positionnés, agissant comme dilateur. Appuyez ensuite sur le plongeur au moment où les greffons sont facilement insérés dans le cuir chevelu. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une incision suivie d'une dilatation.

** Cette technique est décrite dans le Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, vol 18, number 11, nov 1992*

► Needle (Aiguille)

- ✓ Enabled
- ✓ Ultra sharp
- ✓ Cutting edge
- ✓ Thin walled

- ✓ Jetable
- ✓ Ultra pointue
- ✓ Coupe des bords
- ✓ Parois minces

✓ Enabled to successfully dense pack graft (performing «megasesions» of 3000 grafts in one session)

✓ Allows for excellent angulation for a natural «shingling of hair.

✓ Minimize vascular embarassement, scars and popping problems...

✓ Eliminate the risk of depositing epidermal tissues under the skin as can occur with standard round hypodermic needles.



✓ Permet d'insérer des paquets de greffons (pour des «megasesions» de 3000 implants en une seule session)

✓ Permet une excellente angulation pour un aspect naturel de la chevelure.


✓ Réduit les risques de problèmes de vascularisation, cicatrices et phénomène de popping...

✓ Élimine les risques de déposer des tissus sous la peau comme cela se produit parfois avec des aiguilles rondes standard.

Follipen HAIR TRANSPLANTER

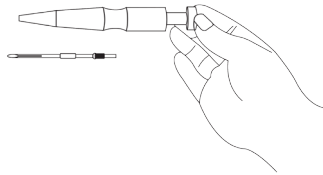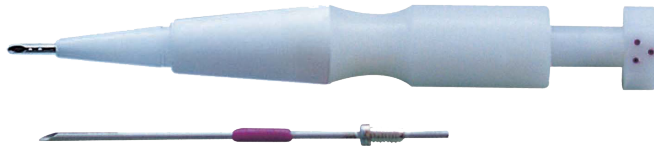


How to replace the needle ? Comment remplacer l'aiguille ?

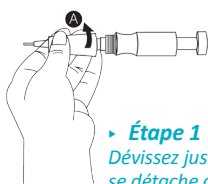


► Étape 1

Dévissez jusqu'à ce que le capuchon se détache de la base.

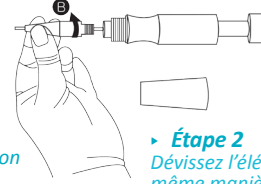


► Étape 2

Dévissez l'élément B de la même manière.

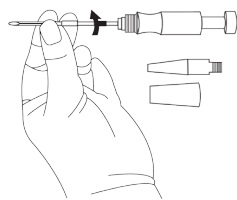

► Étape 3

Dévissez l'aiguille.

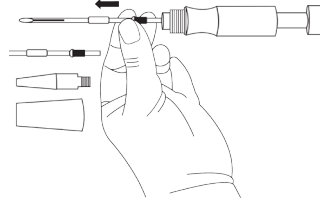

► Étape 4

Vous pouvez alors enlever et remplacer l'aiguille.

Diameter size available Diamètres disponibles

Graft size ideal for Taille des greffons idéale pour

Color coding cap Code couleur

24 GA (0,6mm)	Fine single hair and eyebrow <i>Cheveu fin ou sourcil</i>	●
22 GA (0,8mm)	1 hair / 1 cheveu	●
20 GA (1,0mm)	2 hairs / 2 cheveux	●
18 GA (1,3mm)	3-4 hairs / 3-4 cheveux	●
16 GA (1,5mm)	4-5 hairs / 4-5 cheveux	●




☎ 06 38 68 84 32

📍 230, rue du fbg Saint-Honoré - Paris 8^e

FOLLIPEN HAIR TRANSPLANTER


Transplanteur capillaire

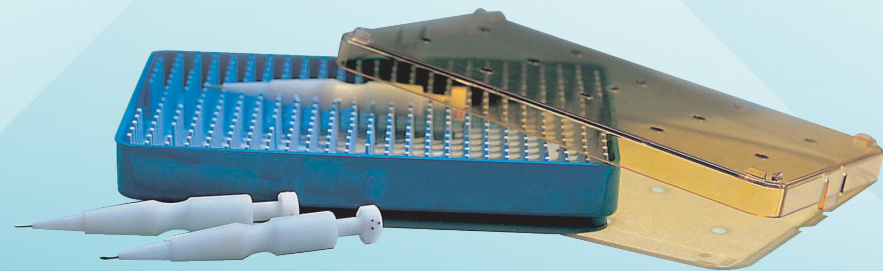

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

FOLLICULAR UNIT HAIR TRANSPLANTATION WITH FOLLIPEN HAIR TRANSPLANTER

TRANSPANTATION D'UNITÉS FOLLICULAIRES AVEC LE

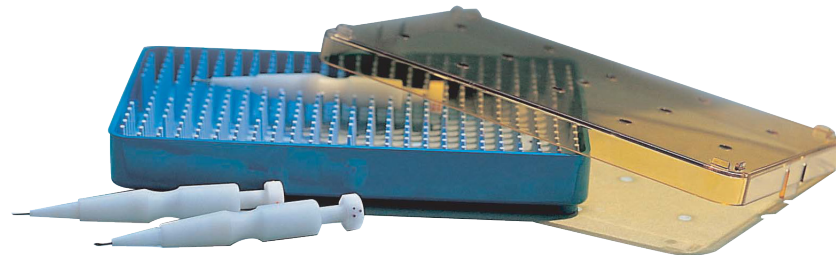

- ✓ Easy and simple to replace needle
- ✓ Easy to adjust needle's length
- ✓ Ultra sharp and cutting edge
- ✓ Thin walled needle

- ✓ Simplicité et facilité de changement d'aiguille
- ✓ Facilité d'ajustement de la taille de l'aiguille
- ✓ Coupe ultra aiguisée et coupe des bords
- ✓ Parois minces de l'aiguille



BODY // AUTOCLAVE NEEDLE : DISPOSABLE CORPS : AUTOCLAVE // AIGUILLE : JETABLE

Operating PROCEDURE (Procédure opératoire)



► **Step 1** Harvesting an elliptical graft.

► **Étape 1** Extraire un greffon de forme elliptique.

► **Step 2** Cutting the graft to make a Follicular Unit (FU).

► **Étape 2** Découper le greffon pour obtenir des unités folliculaire.

► **Step 3** FUE is being placed onto the needle of the hair transplanter.

► **Étape 3** La FUE est placée dans l'aiguille du transplanter capillaire.

► **Step 4** Follipen in place.

► **Étape 4** Positionnez le Follipen.

► **Step 5** Advanced post-op hair care with XL-Hair © par Skintech PharmaGroup..

► **Étape 5** Soins capillaires post opératoire avec XL-Hair © par Skintech PharmaGroup.

HAIR CAPILLAIRE



Just after the procedure.
Juste après l'intervention.



7 months after the procedure.
7 mois après l'intervention.

EYEBROWS SOURCILS



Before the procedure.
Avant l'intervention.



1 months after the procedure.
1 mois après l'intervention.

EYELASH CILS



Before the procedure.
Avant l'intervention.



6 months after the procedure.
6 mois après l'intervention.

► XL-hair©

HA dermal implant associated with a biorevitalization solution specific for scalp area in case of alopecia

Injection d'une solution bio-révitaisante conçue spécifiquement pour le cuir chevelu.

